

MELISSA 12

Stabil sjukvårdsmadrass med god komfort och sittfunktion

Melissa 12 är en sjukvårdsmadrass i Melissa-serien. Med inbyggd sittfunktion är den utvecklad för att underlätta den dagliga vården av patienter. Madrassen är utvecklad för behandling av trycksår upp till och med kategori 2. Det dokumenterat låga trycket är avlastande för utstickande kroppsdelar som axlar och hälar.

- **HÖGELASTISKT KALLSKUM.** Melissa 12 har en homogen 12 alternativt 14 cm tjock skumkärna som ger en stabil och stadig madrass.
- **UPP TILL OCH MED SÅRKATEGORI 2.** Det högkvalitativa kallskummet i kombination med vårt omtyckta RX-överdrag gör att madrassen lämpad som hjälpmedel vid behandling av patienter med trycksår upp till och med kategori 2.
- **TRE VALBARA VÄTSKETÄTA ÖVERDRAG.** Våra prasselfria RX-överdrag är vätsketäta för att förhindra blod och andra kroppsvätskor att tränga in till madrassens skumkärna.
 - RX-5 Basöverdrag
 - RXH-5 Med handtag för förflyttning av madrass
 - RXI-5 Med handtag och evakueringsfunktion



MELISSA 12

STABIL MADRASS UTVECKLAD FÖR BRA KOMFORT OCH TRYCKAVLASTNING.

Vätsketätt överdrag med goda egenskaper


Melissa 12 levereras med ett överdrag ur RX-serien. En serie överdrag tillverkade av 2-stretchig polyuretanväv som både är ånggenomsläpplig och prasselfri. Överdraget har dragkedja på 3 eller 4 sidor (RXI-5) för att underlätta den dagliga skötseln av madrassen. Samtliga dragkedjor har droppkant.

Melissa 12 är en stabil och trygg sjukvårdsmadrass

Skumkärnan en homogen kärna, höglastiskt kallskum (50 kg/m³) som valts för dess stabilitet kombinerat med de goda tryckvärdena (Se tabell nedan). Tillsammans med vårt RX-överdrag ger detta förut sättningar för en god tryckavlastning. Med ett dokumenterat lågt tryck (45 mm/Hg) för utstickande kroppsdelar, såsom hälar och skuldror, krävs ingen separat hälzon.

Melissa 12 erbjuder sittfunktion

Madrassen har genomgått utmattningstest enligt standard SS 876 00 11 med goda resultat. Madrassen erbjuder därigenom sittfunktion med höjt rygggläge i säng samt vid sängkant.

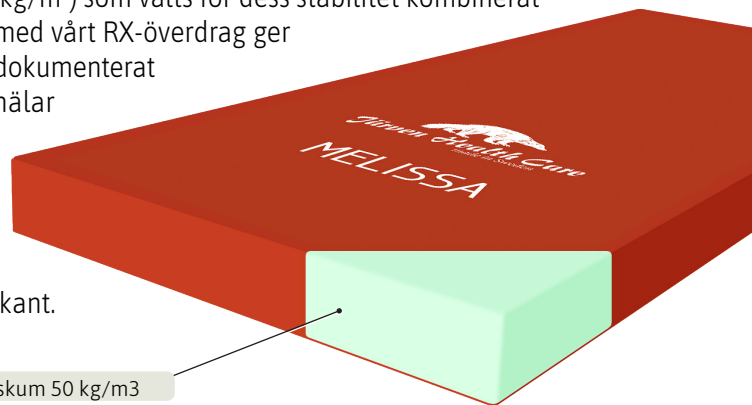

12 alt 14 cm höglastiskt kallskum 50 kg/m³

STANDARD FÖR OBJEKTIV UTVÄRDERING AV MADRASSERS TRYCKAVLASTANDE EGENSKAPER.

För att få en objektiv bedömning av madrassers tryckavlastande egenskaper har RISE utvecklat en standard där man med intryckskroppar mäter det faktiska mottryck en madrass ger. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard SS 876 00 13.

Melissa 12 har testats av RISE enligt mämetod SS 876 00 13 och är tryckavlastande till och med sårkategori 2.

Testresultatet redovisas nedan.

Belastning	Extra låg	Låg	Medel	Hög
Stor intryckskropp 300 N	< 30,0	30,0 - 34,9	35,0 - 39,9	40,0 - 44,9
Stor intryckskropp 600 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9
Liten intryckskropp 40 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9

Madrass	Stor intryckskropp 300 N	Stor intryckskropp 600 N	Liten intryckskropp 40 N
Melissa 12, 12 cm	27	47	45
Melissa 12, 14 cm	30	51	46

PRODUKTSPECIFIKATIONER



Material	12 alternativt 14 cm höglastiskt kallskum 50kg/m ³ ,
Storlekar	200/205/210 x 80/85/90/105/120 x 12/14 cm (För andra storlekar kontakta Järven Health Care.)
Sårkategori	Till och med kategori 2
Madrassvikt	ca 11 kg beroende på längd och bredd

Brukarvikt	12 cm skum - upp till och med 180 kg 14 cm skum - upp till och med 220 kg
Brand	SS 87600 01, normalrisk (testmetod EN 597-1 & 2)
Återvinning	Madrass med överdrag är helt återvinningsbar. Sorteras som brännbart avfall (demontering krävs ej)
Märkning	Tillverkningsår, månad, dag, EAN, skötselanvisningar, kontaktinformation, uppfyllda standarder samt placering i säng.

