



# MOLLIS BLUE BLACK

Stabil bårvagnsmadrass för tryckavlastning redan från start

När det kommer till vårdarbete är det viktigt att säkerställa patientens bekvämlighet och hälsa från första stund. Mollis Blue Black har utvecklats för vara en stabil och säker bårvagnsmadrass med tryckavlastande egenskaper. Håll patientens komfort och hälsa i fokus från början av vårdprocessen med Mollis Blue Black.

- **VALBAR UNDERSIDA.** Mollis Blue Black bårvagnsmadrass kan levereras med blank/lackad undersida för ökad glidförmåga vid sidoförflyttning av madrassen samt en matt/olackad sida som ger högre friktion..
- **HELT INSVETSAD FÖR GOD HYGIEN.** För att ge en god hygien har Mollis Blue Black ett svetsat överdrag helt utan sömmar och blixtlås.
- **TVÅ VALBARA KUDDAR.** Som standard levereras Mollis Blue Black med en matchande kudde som har integrerade fästband. Som alternativ finns även en anatomiskt formad kudde med viskoelastisk skum och fästband.



  
**Järven Health Care**

# MOLLIS BLUE BLACK

## PATIENTENS KOMFORT OCH HÄLSA I FOKUS REDAN FRÅN BÖRJAN AV VÅRDPROCESSEN.


Ofta är bärvagnsmadrassen den första kontakten patienten har av vården. Det är också vanligt att vistelsen på bärvagnsmadrassen blir under längre tid. För att minska risken för att trycksår ska uppstå är det av stor vikt att madrassen är anpassad för detta.

Mollis Blue and Black är utvecklad för att erbjuda tryckavlastning redan från start och är samtidigt komfortabel att ligga på.

### Genomtänkt konstruktion

Den liksidigt utformade madrassen har sex handtag per långsida som standard alternativt tre tyghandtag per långsida för att underlätta sidoförflyttning. Madrassen kan även beställas utan handtag om denna funktion inte är nödvändig.

Mollis Blue Black har en kärna av två olika skumtyper vilket gör att madrassen är avlastande och skön att ligga på även under längre tid. Botten består av 5 cm höglastiskt kallskum med ett 5 cm följsamt och mjukt viskoelastiskt skum på toppen.

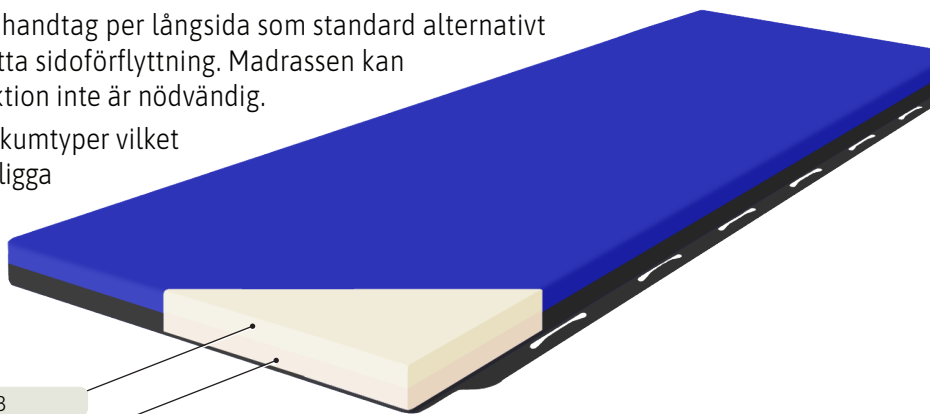

5 cm viskoelastiskt skum 55 kg/m<sup>3</sup>

5 cm kallskum 35 kg/m<sup>3</sup>

### STANDARD FÖR OBJEKTIV UTVÄRDERING AV MADRASSERS TRYCKAVLASTANDE EGENSKAPER.

För att få en objektiv bedömning av madrassers tryckavlastande egenskaper har RISE utvecklat en standard där man med intryckskroppar mäter det faktiska mottrycket i en madrass ger. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard SS 876 00 13.

Mollis Blue Black har testats av RISE enligt mätmetod i SS 876 00 13 och är tryckavlastande till och med sårkategori 2.

#### Testresultatet redovisas nedan.

Belastning	Extra låg	Låg	Medel	Hög
Stor intryckskropp 300 N	< 30,0	30,0 - 34,9	35,0 - 39,9	40,0 - 44,9
Stor intryckskropp 600 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9
Liten intryckskropp 40 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9

Madras	Stor intryckskropp 300 N	Stor intryckskropp 600 N	Liten intryckskropp 40 N
Mollis Blue Black	36	74	68

## PRODUKTSPECIFIKATIONER



**Material** 5 cm viskoelastiskt skum 55kg/m<sup>3</sup>  
5 cm kallskum 35 kg/m<sup>3</sup>

**Storlekar** 200 x 60 x 10 cm  
(För andra storlekar kontakta Järven Health Care.)

**Madrassvikt** ca 11 kg beroende på längd och bredd

**Brukarvikt** Upp till och med 130 kg.

**Brand** SS 87600 01, normalrisk (testmetod EN 597-1 & 2)

**Återvinning** Madras med överdrag är helt återvinningsbar. Sorteras som brännbart avfall (demontering krävs ej)

**Märkning** Tillverkningsår, månad, dag, EAN, skötselansvisningar, kontaktinformation, uppfyllda standarder samt placering i säng.



Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN  
Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10  
www.jarven.se | healthcare@jarven.se