



# LENTEX EXCLUSIVE

Komfortabel hygienmadrass med unikt laminerat överdrag och tre limmade skummer.

Exclusive är en stabil hygienmadrass i LENTEX®-serien utvecklad för behandling av trycksår upp till och med kategori 2. Den genomtänkta skumsammansättningen med en fastare skumkärna och två limmade mjukare skum är utvecklad för ge hög komfort och god tryckavlastning.

- **EXTREMT FLEXIBELT ÖVERDRAG** möjliggör Immersion and Envelopment. En viktig faktor för god tryckavlastning.
- **SEMI-TRANSPARENT LAMINAT** underlättar upptäckten av kontaminerade skumkärnor.
- **HELT UTAN SÖMMAR OCH DRAGKEDJOR** för att minska risken för kontaminering av madrassens skumkärna
- **VITT YTSKIKT**  
Det ljusa ytskiktet underlättar för personal att upptäcka föroreningar på madrassens yta.
- **UNIK YTA FÖR EFFEKTIV RENGÖRING**  
Tack vare ytskiktets unika struktur har utomstående studier visat att överdraget håller kvar upp till 73% mer decinfektionsmedel\* vid rengöring.

\* Studie, Tyskland 1999



# LENTEX EXCLUSIVE

## EN STADIG MADRASS MED GOD TRYCKAVLASTNING.

### Godkänd för säng- och madrassvätt


Då det blir allt vanligare med automatiserade säng- och madrassvättar är det viktigt med produkter som klarar av den hanteringen utan att fyllas med vatten eller blåsas upp. Våra Lentexmadrasser har testats och godkänts för användning med säng- och madrassvätt från Sonosteam/Semi Staal.

### Avlastning för utstickande kroppsdelar

Skumkärnan består av tre lager med noga utvalda skumtyper. Tillsammans med det unika ytskiktet Lentex® ger detta förutsättningar för mycket god tryckavlastning. Madrassen har ett dokumenterat lågt tryck (51 mm/Hg) för utstickande kroppsdelar, såsom hälar och skuldror varför ingen separat hälzon krävs.

### Hållbarhet och sittfunktion

Madrassen har genomgått utmattningstest enligt standard SS 876 00 11 med goda resultat. Madrassen erbjuder därigenom sittfunktion med höjt ryggläge i säng.

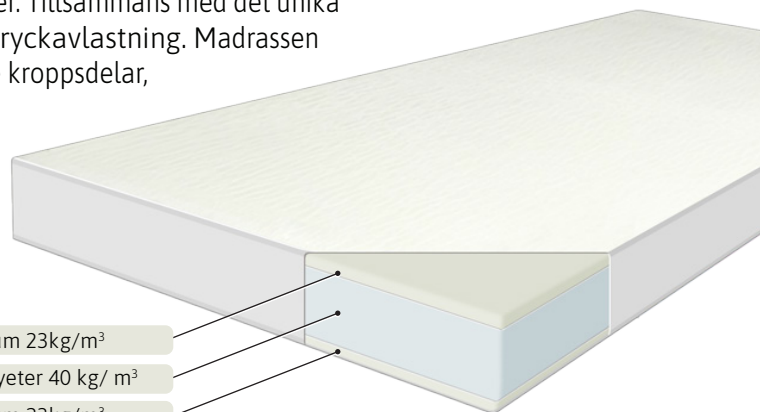

2 cm supersoft kallsaum 23kg/m<sup>3</sup>

9 cm tryckavlastande polyeter 40 kg/ m<sup>3</sup>

2 cm supersoft kallsaum 23kg/m<sup>3</sup>

### STANDARD FÖR OBJEKTIV UTVÄRDERING AV MADRASSERS TRYCKAVLASTANDE EGENSKAPER.

För att få en objektiv bedömning av madrassers tryckavlastande egenskaper har RISE utvecklat en standard där man med intryckskroppar mäter det faktiska mottrycket i en madrass ger. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard SS 876 00 13.

Lentex® Exclusive har testats av RISE enligt SS 876 00 13 och är tryckavlastande upp till och med sårkategori 2.

### Testresultaten redovisas nedan.

Belastning	Extra låg	Låg	Medel	Hög
Stor intryckskropp 300 N	< 30.0	30.0 - 34.9	35.0 - 39.9	40.0 - 44.9
Stor intryckskropp 600 N	< 45.0	45.0 - 52.9	53.0 - 60.9	61.0 - 68.9
Liten intryckskropp 40 N	< 45.0	45.0 - 52.9	53.0 - 60.9	61.0 - 68.9

Madrass	Stor intryckskropp 300 N	Stor intryckskropp 600 N	Liten intryckskropp 40 N
Lentex Exclusive	35	48	51

## PRODUKTSPECIFIKATIONER



<b>Material</b>	2 cm supersoft kallsaum 23kg/m <sup>3</sup> , 9 cm tryckavlastande polyeter 40 kg/m <sup>3</sup> 2 cm supersoft kallsaum 23kg/m <sup>3</sup> . Ytskiktet Lentex® är av polyuretan.
<b>Storlekar</b>	200/205/210 x 80/85/90/105/120 x 13 cm (För andra storlekar kontakta Järven Health Care.)
<b>Sårkategori</b>	Till och med kategori 2
<b>Madrassvikt</b>	6-8 kg beroende på längd och bredd
<b>Hygien</b>	SS-EN ISO 811.
<b>Madrassvätt</b>	Godkänd av Sonosteam/Semistaal

<b>Max brukarvikt</b>	180 kg.
<b>Garanti</b>	3 år på utmattning av madrasskärnans B-värde enligt SS 876 00 11. 5 år med åldersavskrivning på vidhäftningen av Lentex.
<b>Brand</b>	SS 87600 01, normalrisk (testmetod EN 597-1 & 2)
<b>Återvinning</b>	Helt återvinningsbar. Sorteras som brännbart avfall. Demontering krävs ej.
<b>Märkning</b>	Tillverkningsår, månad, dag, EAN, skötselansvisningar, kontaktinformation, uppfyllda standarder samt placering i säng.

