



LENTEX WATERLILY

Genomtänkt hygienmadrass med goda miljöegenskaper väl lämpad för tyngre patienter

Lentex[®] Waterlily är en spänstig och flexibel madrass som lämpar sig väl för tyngre patienter. Madrassens kärna är speciellt utvald för sina goda miljöegenskaper. Detta styrks av mycket goda resultat i madrassens omfattande livscykelanalysen, avseende miljöpåverkan.

- **MYCKET GOD TRYCKAVLASTNING.** Det extremt flexibla överdraget bidrar till madrassens goda tryckavlastning genom att möjliggöra Immersion och Envelopment.
- **MINSKA RISKEN FÖR KONTAMINATION** med LENTEX som helt saknar sömmar och dragkedjor
- **FÄRRE VÅRDRELATERADE INFEKTIONER.** Det semitransparenta överdraget underlättar upptäckten av kontaminerade skumkärnor.
- **FÖREBYGG VÅRDRELATERADE INFEKTIONER**
Det ljusa ytskiktet underlättar för personal att upptäcka kontaminering av madrassens yta.
- **UNIK YTA FÖR EFFEKTIV RENGÖRING.** Tack vare ytskiktets unika struktur har utomstående studier visat att överdraget håller kvar upp till 73% mer decinfektionsmedel* vid rengöring.
- **GOD TOTALEKONOMI** tack vare skummets höga kvalitet har madrassen lång hållbarhet.

** Studie, Tyskland 1999*



Järven Health Care

LENTEX WATERLILY

UTVECKLAD FÖR HÖG KOMFORT OCH MYCKET GOD TRYCKAVLASTNING.

Godkänd för säng- och madrassvätt


Då det blir allt vanligare med automatiserade säng- och madrassvättar är det viktigt med produkter som klarar av den hanteringen utan att fyllas med vatten eller blåsas upp. Våra Lentexmadrasser har testats och godkänts för användning med säng- och madrassvätt från Sonosteam/Semi Staal.

Avlastning för utstickande kroppsdelar

Den homogena skumkärnan består av ett utvalt miljöanpassat skum. Tillsammans med det unika ytskiktet Lentex® ger detta förutsättningar för mycket god tryckavlastning. Madrassen har ett dokumenterat lågt tryck (50 mm/Hg) för utstickande kroppsdelar, såsom hälar och skuldror varför ingen separat hälzon krävs.

Hållbarhet och sittfunktion

Madrassen har genomgått tryckmätning enligt standard SS 876 00 13 med goda resultat. Madrassen erbjuder därigenom sittfunktion med höjt ryggläge i säng.

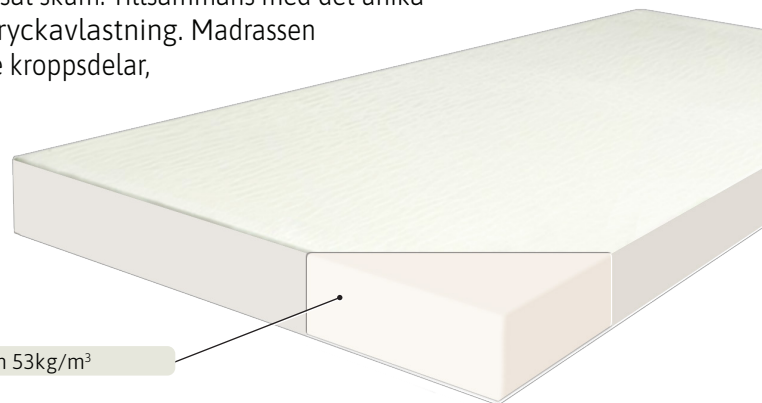

12 cm Waterlilyskum 53kg/m³

STANDARD FÖR OBJEKTIV UTVÄRDERING AV MADRASSERS TRYCKAVLASTANDE EGENSKAPER.

För att få en objektiv bedömning av madrassers tryckavlastande egenskaper har RISE utvecklat en standard där man med intryckskroppar mäter det faktiska mottryck en madrass ger. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard SS 876 00 13.

Lentex® Waterlily har testats av RISE enligt SS 876 00 13 och är tryckavlastande till och med sårkategori 2.

Testresultatet redovisas nedan.

Belastning	Extra låg	Låg	Medel	Hög
Stor intryckskropp 300 N	< 30,0	30,0 - 34,9	35,0 - 39,9	40,0 - 44,9
Stor intryckskropp 600 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9
Liten intryckskropp 40 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9

Madras	Stor intryckskropp 300 N	Stor intryckskropp 600 N	Liten intryckskropp 40 N
Waterlily	32	48	50

PRODUKTSPECIFIKATIONER



Material	12 cm homogent MDI-skum 53kg/m ³ , Ytskiktet Lentex® är av polyuretan.
Storlekar	200/205/210 x 80/85/90/105/120 x 12 cm (För andra storlekar kontakta Järven Health Care.)
Sårkategori	Till och med kategori 2
Madrasvikt	10-16 kg beroende på längd och bredd
Hygien	SS-EN 811:2018.
Madrasvätt	Godkänd av Sonosteam/Semistaal
Max brukarvikt	180 kg.

Garanti	4 år på utmattning av madrasskärnans B-värde enligt SS 876 00 11. 5 år med åldersavskrivning på vidhäftningen av Lentex.
Brand	SS 87600 01, normalrisk (testmetod EN 597-1 & 2)
Återvinning	Helt återvinningsbar. Sorteras som brännbart avfall. Demontering krävs ej.
Märkning	Tillverkningsår, månad, dag, EAN, skötselanvisningar, kontaktinformation, uppfyllda standarder samt placering i säng.



Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10
www.jarven.se | healthcare@jarven.se