

# MELISSA BASIC

## Vänd och roterbar vårdmadrass med valbart hygienöverdrag

Med Melissa Basic får du en prisvärd en bra grundmadrass med god hållbarhet och bibehållen kvalitet. Melissa Basic är utvecklad för att hjälpa med att förebygga trycksår upp till och med kategori 1.

- **HÖGELASTISKT KALLSKUM.** Melissa Basic har ett höglastiskt kallsaum som ger en hållbar och stabil vårdmadrass.
- **VALBART VÄTSKETÄTT ÖVERDRAG**  
Melissa Basic levereras med ett prasselfritt RX-överdrag. Överdraget kan levereras med handtag eller evakueringsfunktion.
- **DRAGKEDA PÅ 3 ELLER 4 SIDOR**  
Beroende på valet av överdrag har överdraget dragkedjor på tre alternativt fyra sidor. Samtliga överdrag har droppkant över dragkedjorna för att underlätta hygienarbetet.



# MELISSA BASIC

## EN UTMÄRKT STANDARDMADRASS MED VÄND- OCH ROTERBAR SKUMKÄRNA.


Madrassen har en homogen skumkärnan vilket gör att den kan roteras och vändas. Något som möjliggör en jämnare belastning över dess yta. Melissa Basic är utformad för att vara en tyst medarbetare över många år.

### Vätsketätt överdrag med goda egenskaper

Melissa Basic levereras med RX-överdrag. Ett hygienöverdrag tillverkat av ånggenomsläpplig och prasselfri 2-stretchig polyuretanväv. Överdraget finns i tre modeller:

- RX (levereras som standard)
- RXH med handtag som underlättar vid hantering av madrassen
- RXI med inbyggd evakueringsfunktion

Överdragen har dragkedja med droppkant på 3 sidor förutom överdrag RXI som dragkedja med droppkant på 4 sidor

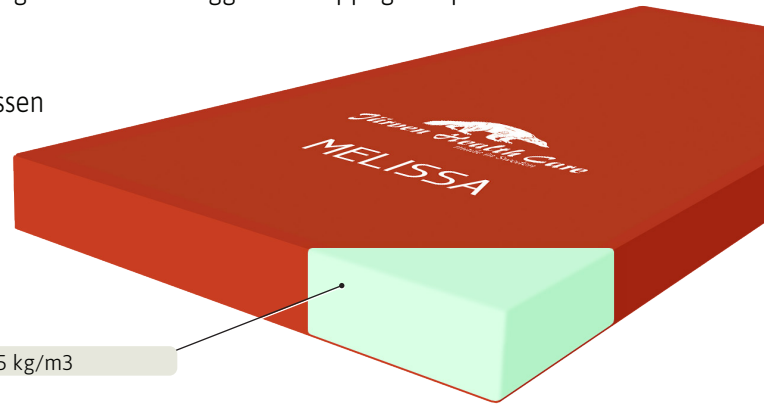

12 cm kallskum 35 kg/m<sup>3</sup>

### STANDARD FÖR OBJEKTIV UTVÄRDERING AV MADRASSERS TRYCKAVLASTANDE EGENSKAPER.

För att få en objektiv bedömning av madrassers tryckavlastande egenskaper har RISE utvecklat en standard där man med intryckskroppar mäter det faktiska mottrycket i en madrass. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard SS 876 00 13. Bäddmadrassen har testats på en 12 cm sjukvårdsmadrass.

Melissa Basic har testats av RISE enligt mätmetod SS 876 00 13 och är tryckavlastande till och med sårkategori 1.

### Testresultatet redovisas nedan.

Belastning	Extra låg	Låg	Medel	Hög
Stor intryckskropp 300 N	< 30,0	30,0 - 34,9	35,0 - 39,9	40,0 - 44,9
Stor intryckskropp 600 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9
Liten intryckskropp 40 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9

Madras	Stor intryckskropp 300 N	Stor intryckskropp 600 N	Liten intryckskropp 40 N
Melissa Basic	38	52	68

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

<b>Material</b>	12 cm kallskum 35 kg/m <sup>3</sup>
<b>Storlekar</b>	200x80/85/90/105/120x12 cm (För andra storlekar kontakta Järven Health Care.)
<b>Sårkategori</b>	Till och med kategori 1
<b>Madrassvikt</b>	ca 7 kg beroende på längd och bredd

<b>Brukarvikt</b>	Upp till och med 180 kg.
<b>Brand</b>	SS 87600 01, normalrisk (testmetod EN 597-1 & 2)
<b>Återvinning</b>	Madrass med överdrag är helt återvinningsbar. Sorteras som brännbart avfall. Demontering krävs ej.
<b>Märkning</b>	Tillverkningsår, månad, dag, EAN, skötselansvisningar, kontaktinformation, uppfyllda standarder samt placering i säng.

